




### Cura no Consultório num só toque

O ProCure 2 foi projetado com precisão para extrair as melhores propriedades mecânicas das suas impressões 3D. Os seus perfis de resina pré-programados fornecem com precisão a quantidade certa de calor e luz.

Quando usada em conjunto com as impressoras 3D Pro S e o Pro Wash/Dry, você pode ir da digitalização à entrega em menos de uma hora.

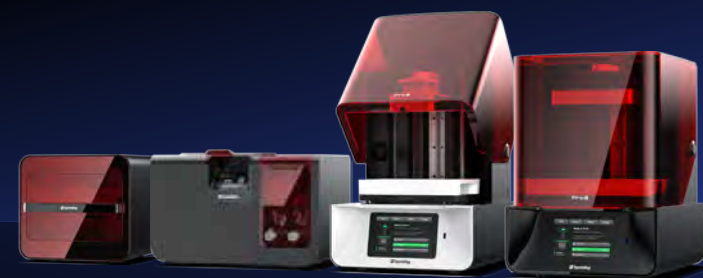

**SprintRay**

Brunnenweg 11  
64331 Weiterstadt  
Germany

en.spinray.com  
info.eu@spinray.com



# ProCure 2

O MAIS AVANÇADO SISTEMA DE PÓS-CURA

## RÁPIDO

Cura várias peças em 2 minutos com o motor de luz UVA personalizado

## POTENTE

25x mais intensidade de luz do que outros produtos de cura

## SIMPLES

Fácil de usar e ergonómico, projetado para as necessidades da Odontologia



# A última Tecnologia

ProCure 2 é rápido. Rápido o suficiente para permitir verdadeiros fluxos de trabalho no Consultório com impressão 3D SprintRay. E graças ao seu motor de luz personalizado, ele fornece calor instantaneamente, sem necessidade de pré-aquecimento. Bem-vindo ao Consultório.



## Liderando pelo Design

Projetado do zero para cumprir os nossos rigorosos requisitos no Consultório, o motor de luz UVA personalizado é o coração do ProCure 2. O seu design exclusivo em "U" oferece 360 graus de cobertura de cura.

# 25x Intensidade de Luz

## 25x

### Mais potente

Graças ao seu motor de cura em "U" personalizado, o ProCure 2 pode pós-curar completamente peças dentais impressas em 3D em apenas alguns minutos usando luz e calor para propriedades mecânicas ideais.



### Aquecimento instantâneo

Porque o ProCure 2 emite luz concentrada de 385nm, gera calor localmente em cada peça. Isso elimina a necessidade de aquecimento ambiente, reduzindo consideravelmente os tempos gerais de cura



### Termodinâmica ativa

Engenharia excepcional garante que o ProCure 2 está sempre na temperatura certa. Termodinâmica ativa e passiva trabalham em perfeita harmonia para manter o exterior frio ao toque.



### Scan da Câmara

O motor de luz no ProCure 2 examina suavemente a câmara de cura para certificar-se de que cada peça recebe uma pós-cura uniforme e completa.

## 12x mais rápido Protetores oclusais

4 Min ProCure 2

65 Min ProCure 1

## 10x mais rápido Modelos dentários

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

## 10x mais rápido Guias cirúrgicas

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

## 13x mais rápido Próteses totais sobre implantes

5 Min ProCure 2

65 Min ProCure 1

## 15x mais rápido Moldeiras de colagem indireta

2 Min ProCure 2

35 Min ProCure 1

## 10x mais rápido Próteses de prova

2 Min ProCure 2

20 Min ProCure 1

Tempo estimado com o ProCure 2 e resinas SprintRay. Os resultados reais variam com base no número de modelos, marca de resina, ambiente e outras configurações.